

# Camas de Hospital

## B-2000

Cama Electrica



 Muebles de Hospital

# Camas de Hospital

## Camas de Hospital

### B-2000

#### Cama Electrica

Camas de hospital electricas Advanced® B-2000 son fabricadas con los mejores materiales y acabados combinados con la más alta calidad de la artesanía, diseño duradero, agradable y funcional.

#### Caracteristicas

- Marco de acero.
- Tablero de cama metálico y enlace suave.
- Barandas laterales plegables de plástico con resorte de gas para un funcionamiento suave.
- Cabecero y piecero de plástico.
- La cabecera y el pie de cama se pueden quitar fácilmente.
- Protector de cubierta de plástico ABS.
- Incluye nueve funciones diferentes.
- Indicador de ángulo de cama y pie de cama.
- Toda la cama arriba / abajo.
- Respaldo arriba / abajo.
- Parte de la pierna arriba / abajo.
- La parte del respaldo y la pierna se mueven juntas.
- Trendelenburg / Trendelenburg invertido.
- "Botón de reinicio" a la posición más baja y plana (Función CRP).
- Manija de liberación rápida para RCP de emergencia.
- Bloqueo y desbloqueo de teclados.
- Freno eléctrico y freno.
- Cuatro ruedas.
- 4 IV Receptáculos alrededor de la cama.
- 1 IV receptáculo ajustable incluido.
- Ganchos de drenaje (opcional)
- Teclado avanzado con "botones táctiles".
- Control para pacientes en ambos carriles frontales.
- Control de enfermera en ambos carriles frontales.
- Control de la enfermera en el panel del pie.
- Batería de respaldo incorporada.
- Pintura en polvo.
- Cumple con el estándar de calidad ISO 13485.
- Fuente de alimentación: AC 100/240 voltios 50/60 Hz.
- Dos años de garantía.



2 AÑOS  
Garantía

## Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones totales	91.3" x 41.3" (2320mm x 1050mm)
Especificaciones	Dimensiones de la cama	77" x 35.5" (1955mm x 900mm)
Peso	Capacidad	250Kg ( 500 Lb )
Ajustable	Alto bajo Trendelenburg Trendelenburg invertido Ángulo de respaldo Ángulo de apoyo de la rodilla Barandas cortas Barandas largas Altura Función CPR	20.9" – 28" (530mm – 710mm) ± 10° ± 10° 0 ~ 65° 0 ~ 45° 10 x 35 10 x 60 25" Botón de reinicio
Ruedas	Diámetro	5.9" ( 150mm )
Especificaciones	Peso	236 Kg ( 520 Lb )
Fuente de alimentación	Voltaje de funcionamiento Frecuencia de operación Poder maximo Batería Capacidad	110 / 220 Volts 50 / 60 Hz 130W 2 piezas 12 V / 1.3AH
Ambiente	Temperatura de trabajo Humedad relativa Presión atmosférica	-10 ° C ~ 40 ° C ≤ 80% 760hpa ~ 1060hpa

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados.

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.  
Éxito a través de la calidad una compañía  
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia, cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.

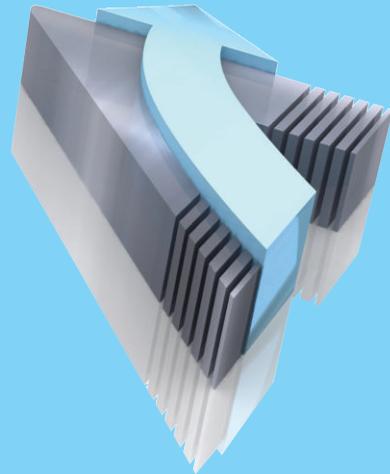

6800 N.W. 77 Court,  
Miami, FL 33166  
U.S.A.  
Phone: 305-477-6331  
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:  
[www.advanced-inst.com](http://www.advanced-inst.com)